



SuperSnap er den mest følsomme ATP test fra Hygiena. SuperSnap er designet til at fungere på alle Hygiena's ATP instrumenter og SuperSnap til at detektere meget lave niveauer af ATP. Testen anvendes primært i føde- og drikkevarerindustri når man ønsker at nå det absolut højeste hygiejneniveau. SuperSnap's reagens er lavet til give en forbedret robusthed overfor rengøringskemi hvilket gør

den til den optimale test i i industrimiljø eller ved testning af specielle prøver.


Ved implementering af SuperSnap i et fødevarer sikkerheds program opdages risiko og problemer i real-time således at forebyggende handlinger kan iværksættes før en ny produktion startes eller man foretager et produktskift.

Fordele:

- Patenteret design der giver maximal prøveopsamling og genfinding
- Meget følsomt og stabilt reagens, der detekterer meget små ATP niveauer
- Robust reagens der er resistent overfor rengøringskemi og temperatur belastning
- 100% genbrugsplastik
- 15 måneders holdbarhed ved opbevaring i køleskabstemperatur (2-8°C)
- 4 ugers holdbarhed ved opbevaring i rumtemperatur (21°C-25°C)


Sensitivt:

- 5 gange så sensitiv som UltraSnap ATP Tests
- Op til 100 gange mere sensitivt end andre ATP systemer, ved brug med EnSURE.
- 5 gange mere robust mod syrebaserede rengøringsmidler.
- 10 gange mere robust overfor alkaliske rengøringsmidler.

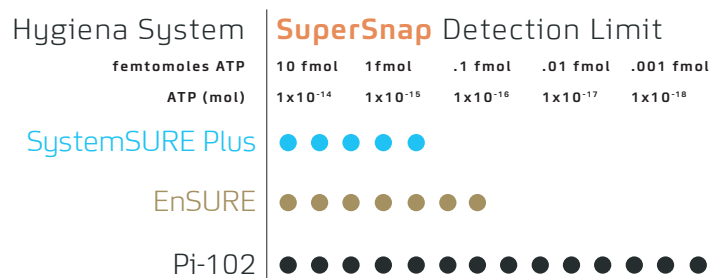

Vare nr.	Beskrivelse	Antal
SUS3000	SuperSnap	100

SuperSnap Procedure:

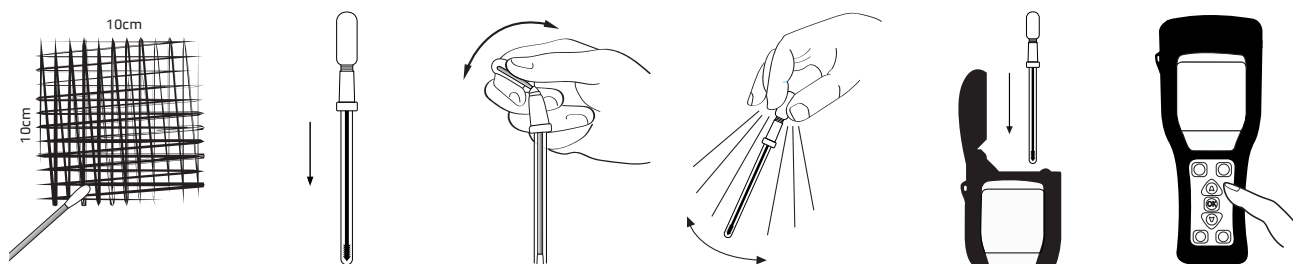

Relaterede Produkter:



EnSURE Touch

EnSURE™ Touch er det sidste nye apparatur indenfor luminometre, som anvendes til at indsamle, analysere og rapportere data fra en række forskellige kvalitets tests såsom; ATP, mikroorganismer og enzymer. EnSURE™ Touch har en 5" touch-skærm, trådløs synkroniseringsteknologi, cloud-baseret software og evnen til at differentiere imellem et stort udvalg af tests. EnSURE™ Touch er designet til at passe ind i dit arbejdsmiljø og give dig de rette data til hygiejnekontrol.



SystemSURE Plus

SystemSURE Plus bruges til ATP hygiejne overvågning. Dette håndholdte instrument er nemt at anvende, ekstremt sensitiv og billigt. SystemSURE Plus tillader brugerne hurtigt at bestemme rengøringens effektivitet og den generelle hygiejnestatus på overflader og i vand, hvilket fører til højere produktkvalitet og reduktion af omkostninger. SystemSure Plus platformen inkluderer SureTrend software.



AquaSnap

AquaSnap måler ATP i flydende prøver, ved at bruge en "honing-ske" til præcist at opsamle 100 µl af den flydende prøve. Testen benytter det stabile reagens i stedet for et frysetørret enzym til at give en bedre reproducerbarhed og sensitivitet. AquaSnap er tilgængelig som hhv. Total og Free format.



UltraSnap

UltraSnap måler ATP på overflader. ATP findes i organisk materiale fra alle levende organismer og bør være reduceret signifikant efter en rengøring. ATP overvågning giver en øjeblikkelig og objektiv måling på rengøringens effektivitet.

Vare nr.	Beskrivelse	Antal
ETOUCH	EnSURE Touch	1
SS Plus	SystemSure Plus ATP System med SureTrend Software	1
AQ-100X	AquaSnap Free ATP i Vand	100
AQ-100FX	AquaSnap Total ATP i Vand	100
US2020	UltraSnap ATP Test	100